


Schema funzionale

Cosa fa l'app, chi fa cosa e in che ordine. Diario della pressione per Android, con dashboard web e report per il medico.

Il flusso dal telefono al medico

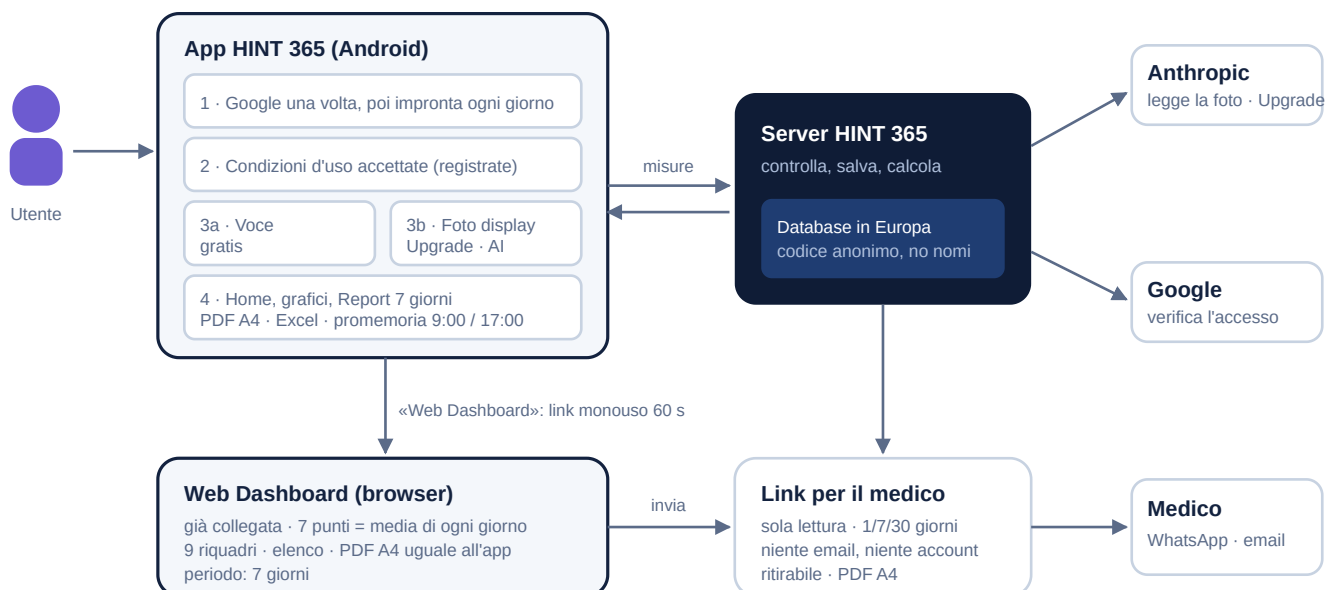

Percorso dell'utente

1. **Installa** l'app dal link pubblico /download (in futuro Play Store).
2. **Accede con Google** una sola volta e dà il consenso privacy. Google serve solo a creare e ritrovare l'account.
3. **Accetta le condizioni d'uso**, vincolanti, alla prima installazione e a ogni aggiornamento: senza accettazione l'app non si apre. Ogni accettazione è registrata (codice anonimo, telefono, versioni, impronta del testo, data).
4. **Ogni giorno** sblocca con impronta o PIN del telefono. Resta collegato finché non sceglie «Esci».
5. **Registra** una misura: a voce (**SYS**, **DIA**, **PUL**, controllati e confermati a schermo) oppure fotografando il display (Upgrade).
6. **Consulta**: ultima misura, settimana, Report con grafico e riquadri.
7. **Condivide**: PDF o Excel dal telefono, oppure Web Dashboard → «Invia al medico».
8. **Cambia telefono**: accede con Google e ritrova tutto. **Esce o cancella l'account** quando vuole.

Livelli

BASE · GRATIS misure a voce, grafici, report PDF ed Excel, promemoria, Web Dashboard, link al medico.


UPGRADE scansione con AI: foto del display del misuratore e, in arrivo, documenti medici (valori in tabelle e grafici). Usa la chiave Anthropic dell'utente: paga lui, direttamente ad Anthropic.

Regole fisse

- Nessuna diagnosi, nessun consiglio, nessun giudizio sui valori: niente zone colorate né «nella norma».
- Etichette sempre **SYS**, **DIA**, **PUL**. Pressione e battiti mai nello stesso grafico.
- Grafici: 7 giorni, un punto per giorno = media di tutte le misure del giorno (spiegato prima dei grafici), valore scritto accanto, asse solo con i numeri dei giorni.
- Stesso PDF A4 dall'app e dal web; dal web si scarica subito come file.
- Niente rosso da nessuna parte: SYS viola, DIA verde acqua, PUL ambra. Nessun colore indica «bene» o «male».
- Bilancia mattina/sera: solo il confronto delle medie, senza giudizio.
- Scan è attivo solo se Anthropic ha appena risposto «sì»: chiave valida e credito. Verifica con una richiesta minima (millesimi di centesimo) all'apertura se l'ultima ha più di un'ora, dopo ogni errore e con «Ricontrolla».
- Misure conservate al massimo 365 giorni: cancellazione automatica ogni notte (cron del Worker). Restano solo le accettazioni delle condizioni, come prova.
- Il gestore paga solo il server (gratuito) e può disattivare a distanza le app installate; ogni utente paga la propria AI.

Architettura e tecnologie

I componenti, come si parlano, dove stanno i dati e come si pubblica una nuova versione.

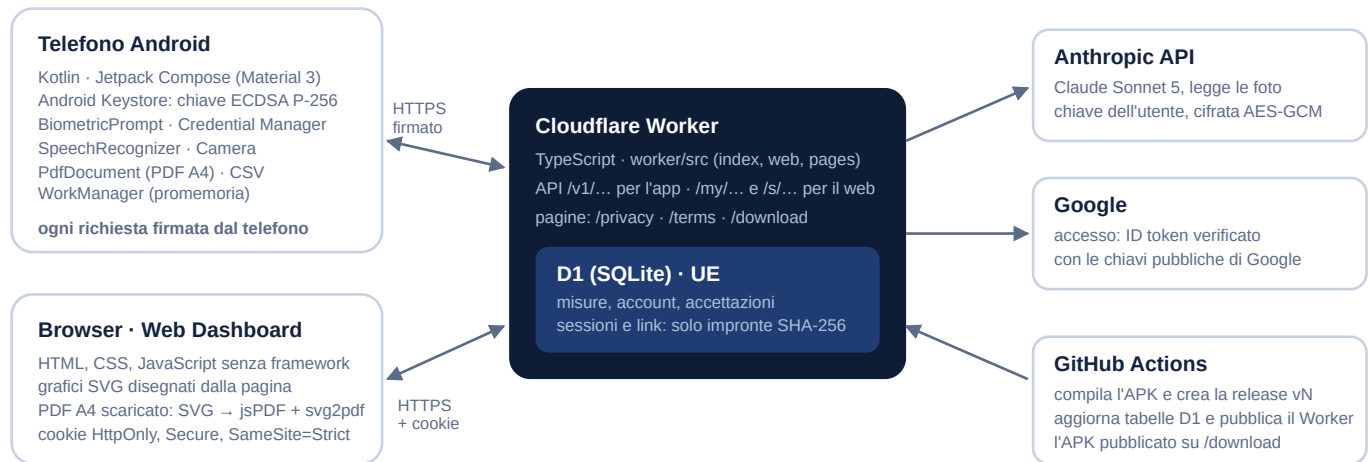

Componenti

Parte	Tecnologia	Cartella
App Android	Kotlin, Compose, minSdk 26, target 34	android/
Server	Cloudflare Workers, TypeScript	worker/src/
Database	Cloudflare D1 (SQLite), giurisdizione UE	worker/schema.sql
Dashboard web	HTML/JS, grafici SVG propri, jsPDF + svg2pdf	worker/public/my/
Lettura foto	Anthropic Messages API	index.ts
Accesso	Sign in with Google + chiave del telefono	Google.kt
Build e rilascio	GitHub Actions, Gradle, Wrangler	.github/workflows/
Guide e documenti	HTML → PDF (Playwright)	docs/

Tabelle del database

persons account (codice anonimo, impronta cifrata dell'account Google, nessuna email) · measurements misure · scans letture foto · ledger credito e costi · person_keys chiavi Anthropic cifrate · acceptances condizioni accettate (solo aggiunte) · web_codes, web_sessions, web_shares accesso web e link al medico · settings, invites.

Sicurezza e dati

- Telefono:** una chiave privata che non esce mai dal telefono firma ogni richiesta; il server rifiuta firme non valide o orari sbagliati di oltre 5 minuti.
- Web:** codice monouso di 60 s nella parte # dell'indirizzo, scambiato con un cookie di 7 giorni. «Esci» sul telefono chiude anche il web.
- Link al medico:** sola lettura, periodo fisso, scadenza 1–30 giorni, ritirabili; niente email né account.
- Disattivazione a distanza:** l'app invia il suo numero di versione a ogni richiesta e chiede /v1/app-status a ogni apertura; in settings app_min_version, app_blocked, app_off. Si cambiano dall'app (gestore → «Disattiva le versioni precedenti») o da GitHub Actions → App versions. Le app senza numero (fino a 0.1.74) valgono 0.
- Database:** solo impronte SHA-256 di codici, cookie e link; chiavi Anthropic cifrate AES-GCM legate all'account.
- Conservazione:** misure e letture foto oltre 365 giorni cancellate ogni notte; accettazioni in un registro a sola aggiunta (tabella acceptances, D1 in UE).
- Dati personali:** nessun nome e nessuna email (dell'account Google solo un'impronta HMAC-SHA256 con chiave del server; l'email resta sul telefono); foto e file elaborati e scartati; dati in UE; cancellazione account immediata (resta solo la prova dell'accettazione).

Pubblicare una versione

- Modifica su un ramo → pull request → unione in main.
- GitHub Actions: aggiorna le tabelle D1, pubblica il Worker, compila l'APK, crea la release v0.1.N, mette l'APK su /download.
- Il sito cambia subito; l'app si aggiorna installando il nuovo APK.

Estendere

La dashboard è a moduli: le analisi saranno un nuovo modulo in web.ts e app.js, con accesso, periodi, invio ed export già pronti.